

Guida rapida di GlucoMen[®] areo

Come eseguire una misurazione della glicemia

1



Inserire una nuova striscia reattiva GlucoMen[®] areo sulla sommità del glucometro.

2



Prelevare una goccia di sangue.

3



Applicare una goccia di sangue sull'estremità della striscia reattiva.

4



Il risultato della misurazione compare dopo 5 secondi.





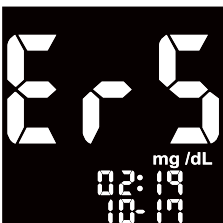
5



Premere il tasto di espulsione per estrarre la striscia reattiva in modo igienico.



Messaggi visualizzati sul display di GlucoMen[®] areo

Messaggio	Cosa significa il messaggio?	Cosa devo fare?
	Errore dell'hardware di sistema	Rivolgersi al servizio di assistenza Telefono: +49 - 800 - 45 82 66 36 (gratuito)
	Striscia reattiva usata o danneggiata	Utilizzare una striscia reattiva nuova
	Errore del campione di sangue	Applicare una quantità maggiore di sangue su una nuova striscia reattiva
	La striscia reattiva è stata rimossa troppo presto	Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva
	Il collegamento NFC è stato interrotto	Ripetere la trasmissione dei dati

